


NEXOPART EML 200 Premium Remote

Mit der Option der Nassabsiebung.

Deckel mit integrierter
Vollkegeldüse

separates
Steuergerät

Aluminium-
deckelblech mit
Gravur

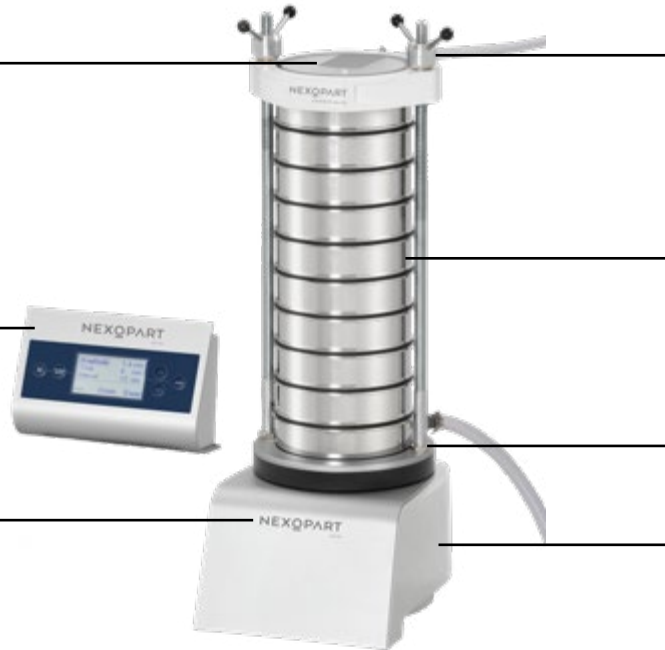

Optional mit TwinNut
Schnellspannsystem

Siebangaben
werden aufgelasert

Siebturm-Untersatz aus
Aluminium

stabiles Alu-Guss
Gehäuse mit
hochwertiger
Oberfläche

ANTRIEB/STEUERUNG

- Noch viel leiser als das Vorgängermodell
- Netzspannungs- und frequenzunabhängig

GEHÄUSE

- Hochwertige Oberfläche
- Gegossenes Alu-Guss Gehäuse
- Deckelblech und Siebturmuntersatz aus Aluminium
- Überarbeitetes und verbessertes Dämpfungssystem - Schwingungsübertragung an den Untergrund wird verringert

DESIGN

- Schlanke und schlichte Form - perfekt für den Laborbereich

BEDIENBARKEIT

- Blick auf das Siebgut durch Deckel mit Schauglas
- Integrierte Vollkegeldüse
- Amplituden frei wählbar bis 3 mm
- Extra großes Display mit einfacher und logischer Bedienung
- Die Restsiebzeit wird groß im Display angezeigt
- Speicherplätze für 49 unterschiedliche Siebprogramme
- Aufrüstbar mit Schnellspannsystem NEXOPART TwinNut
- Optimales Handling des separaten Steuergeräts durch die Wandmontage

Zertifikate

- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 gegen Gebühr
- IQ/OQ-Dokumentation gegen Gebühr

NEXOPART EML Premium Remote:

Bietet alle technischen Vorteile, die auch die Premium bietet, mit der zusätzlichen Option der Nassabsiebung.

NEXOPART

simplicity for your lab

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK.

	EML 200 Pure	EML 200 Premium	EML 200 Premium Remote
Analyseverfahren	Siebung	Siebung	Siebung
Messbereich	20 µm – 125 mm	20 µm – 125 mm	20 µm – 125 mm
max. Siebgutaufgabe	ca. 3 kg	ca. 3kg	ca. 3kg
Siebturmgewicht	max. 8,7 kg	max. 8,7 kg	max. 8,7 kg
Siebdurchmesser	50 mm – 203 mm	50 mm – 203 mm	50 mm – 203 mm
max. Anzahl Siebe	9 (Nutzhöhe 50 mm) 15 (Nutzhöhe 32 mm)	9 (Nutzhöhe 50 mm) 15 (Nutzhöhe 32 mm)	9 (Nutzhöhe 50 mm) 15 (Nutzhöhe 32 mm)
Trocken-Siebung	ja	ja	ja
Nass-Siebung	nein	nein	ja
Netzspannung	110 – 230 V, 50 – 60 Hz	110 – 230 V, 50 – 60 Hz	110 – 230 V, 50 – 60 Hz
Amplitude	fein und grob	frei wählbar bis 3 mm	frei wählbar bis 3 mm
Amplitudenregelung	geregelt und selbstätig nachregulierend	geregelt und selbstätig nachregulierend	geregelt und selbstätig nachregulierend
Timer	0–99 Minuten / Dauerbetrieb	0–99 Minuten / Dauerbetrieb	0–99 Minuten / Dauerbetrieb
Betriebsart	Intervall	Intervall / Kontinuierlich	Intervall / kontinuierlich
Intervall	fest, 10 sec.	einstellbar	einstellbar
Programmspeicherplätze	nein	01–49	01–49
Auswertesoftware CSA	ja Basic Lizenz inklusiv	ja Basic Lizenz inklusiv	ja Basic Lizenz inklusiv
Kalibrierbares Prüfmittel	ja, nach ISO 9001	ja, nach ISO 9001	ja, nach ISO 9001
Schnittstelle	nein	ja	ja
Abmessung B x T x H	385 x 295 x 895 mm	385 x 295 x 875 mm	385 x 295 x 875 mm
Gewicht	37 kg, netto	37 kg, netto	40 kg, netto
Farbe	RAL 9003, signalweiß	RAL 9003, signalweiß	RAL 9003, signalweiß
Bestellnummer	205322921 (Classic „eco“)	205323003 (Classic) 205322988 (TwinNut)	205323034 (Classic) 205322945 (TwinNut)


NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com
www.nexopart.com

DB 42 D 01 092023 EML 200 Premium Remote PDF NEXOPART®.
Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.

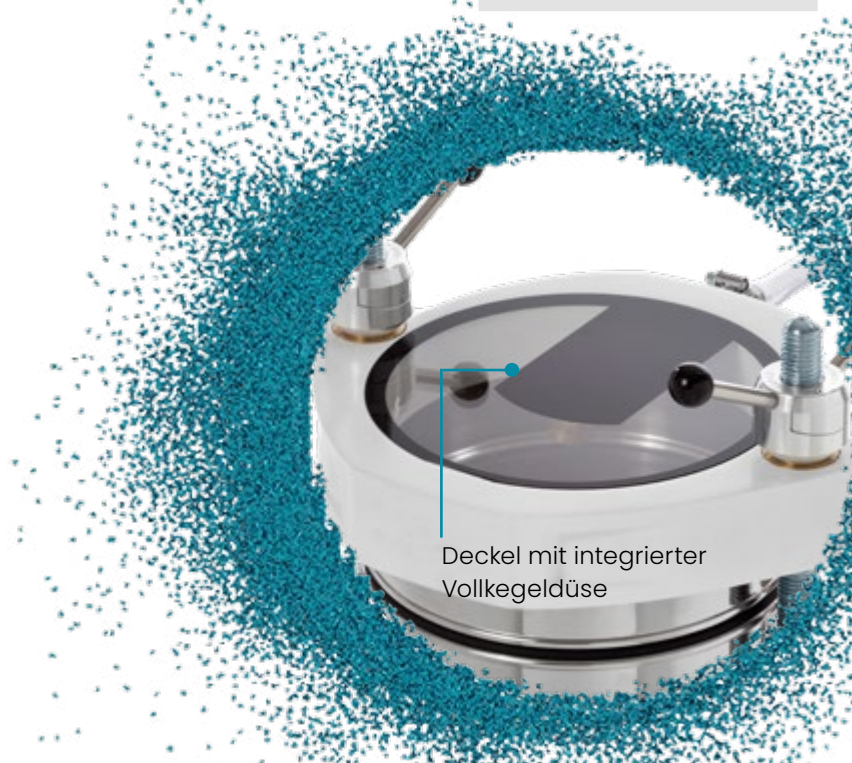

Deckel mit integrierter Vollkegeldüse