



# NEXOPART TwinNut®

Das praktische und leichte Schnellspannsystem  
für Ihren Siebturm.

**NEXOPART**

simplicity for your lab

# NEXOPART TwinNut®

## Das praktische und leichte Schnellspannsystem für Ihren Siebturm.

Sie benötigen eine schnelle und praktische Lösung, um Ihren Siebturm zu fixieren? Mit dem Schnellspannsystem NEXOPART TwinNut® reduzieren Sie im Nu Ihren Zeitaufwand, da das lästige Auf- und Abdrehen der Spannmutter entfällt. Besonders geeignet ist es für Siebungen mit variierenden Siebturmhöhen. Die TwinNut® vereint die Vorteile des Classic- und des Easylock-Systems in perfekter Weise. Die Fixierung Ihres Siebtrums erfolgt wie bei dem Classic-System durch einfaches Drehen (Abb. 1 + 3). Bei einer Veränderung der Siebtrumhöhe erfolgt die Anpassung durch ein Öffnen der Schnellspan-Komponenten (Abb. 2). Sie müssen lediglich die TwinNut® auseinanderziehen, auf die gewünschte Position entlang der Führungsstangen schieben, um mühelos eine Höhenanpassung vorzunehmen.


### Vorteile der NEXOPART TwinNut®:

- Leichtes und schnelles Auswechseln der Siebe, da der Drehaufwand beim Öffnen und Schließen des Systems gering ist
- Griffstangen erleichtern das Festziehen der Spannschraube
- Die Führungsstangen des Classic-Systems können auch für das TwinNut®-System verwendet werden
- Keine Fett- und Staubempfindlichkeit
- Für jeden Einsatzbereich geeignet
- Einsatz bei NEXOPART-Vibrationssiebmaschinen
- Kostengünstiger als andere Schnellspannsysteme

### TECHNISCHE DATEN AUF EINEM BLICK.

	<b>TwinNut® M20</b>	<b>TwinNut® M30</b>
Material Griffstange:	Edelstahl	Edelstahl
Material Spannmutter:	Aluminium	Aluminium
Geeignet für:	EML Premium 200 - 315	EML 450 - UWL 400
Abmessung B x H:	170 x 66 mm	254 x 93 mm
Gewicht:	0,237 kg	0,456 kg
Bestellnummer*:	210114139	208562034

\*beinhaltet eine Spannmutter

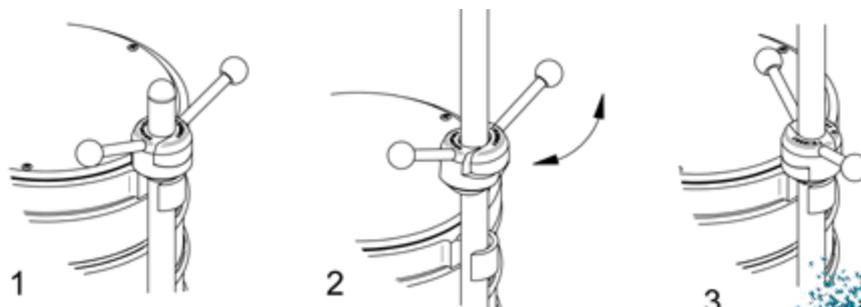

### NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64  
59302 Oelde  
Germany

[sales@nexopart.com](mailto:sales@nexopart.com)  
[www.nexopart.com](http://www.nexopart.com)

DB 130 D 01 062024 TwinNut® PDF NEXOPART  
Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.



Die TwinNut® ist für die NEXOPART Analysensiebmaschinen EML 200 Premium bis UWL 400 erhältlich.

NEXOPART  
SIEBUNG FÜR JEDEN TAG